

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Cette page résume les problèmes courants que vous pourriez éventuellement rencontrer avec le produit. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème avec les informations ci-dessous merci de contacter notre support : services@promonov.ch

Problème	Cause possible	Suggestion
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché correctement	Assurez-vous que le voltage de l'appareil correspond au voltage local et rebranchez l'appareil
	L'appareil a fini sa session de 15 minutes. L'auto timer a mis l'appareil en pause	Pour recommencer une nouvelle session, appuyez de nouveau sur le bouton On/Off
	Vous avez utiliser l'appareil en continu pendant 30 minutes ou plus, ce qui a activé le mode protection anti surchauffe	Débranchez l'appareil et laissez le refroidir pendant 60 minutes avant de le réutiliser
	Une charge excessive a été appliqué sur l'appareil	Réduire la charge et recommencer
L'appareil chauffe anormalement	L'appareil a été utilisée trop longtemps	Débranchez l'appareil et laissez le refroidir avant de le réutiliser
L'appareil fait du bruit	Le bruit est émis par les parties mécaniques de l'appareil	Cela est normal et ne signifie pas que le produit est défectueux

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage

Ne pas utiliser de la laine de verre, des agents de nettoyage abrasifs ou liquides corrosifs (comme l'essence ou l'alcool) pour nettoyer l'appareil

1. Débranchez l'appareil du secteur
2. Nettoyer avec un chiffon sec
3. Ne pas utiliser un chiffon humide ni détergent

Rangement

1. Débranchez l'appareil du secteur
2. Rangez l'appareil dans un endroit sec à l'abri du soleil
3. Ne pas mettre de charges lourdes sur l'appareil



Appareil pour le massage des zones réflexes des pieds

Manuel d'utilisation


Pour vos commandes et service après-vente :

promonov.ch
nouveau

G. Sanga - Bvd de la Forêt 1a (dépôt), 1009 Pully VD
tél. 021 729 87 00 / 021 711 17 65 · info@promonov.ch

DESCRIPTION

1. Panneau de contrôle
2. Compartiment pour les pieds
3. Revêtement en tissu
4. Bouton d'alimentation
5. Pieds
6. Poignée

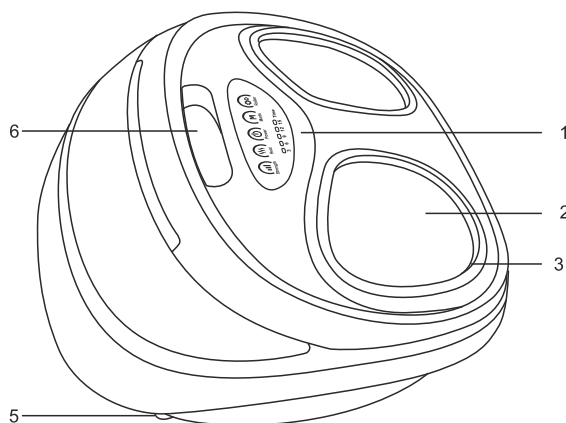


SPÉCIFICATIONS

Numéro de Modèle	L-6888
Type de Produit	Masseur pour les pieds
Alimentation électrique	100-240V~, 50-60Hz
Consommation électrique	48W
Auto Timer	15 mins
Dimensions Produit	410 (L) x 400 (W) x 260 (H) mm
Dimensions Boite	443(L) x 435(W) x 285(H)mm
Consommation électrique	7.2 / 9.9 kg
Normes de sécurité International	CE

MISE EN ROUTE

Panneau de contrôle

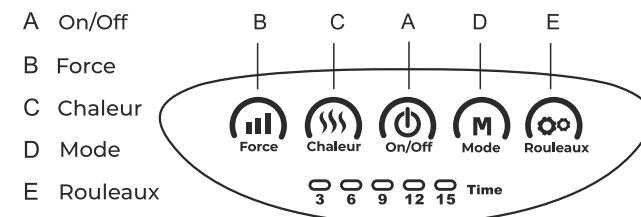

Fonctionnalités principales:

No.	Bouton	Fonction	Indication
A		Appuyez une fois pour mettre l'appareil en route et commencer à utiliser les différentes fonctionnalités. Appuyez une fois pour éteindre.	ON: Lumière Bleue
B		3 niveaux d'intensité de pression d'air: Faible, Moyen et Fort (intensité Faible par défaut). Le bouton ne sera actif que quand le mode pression d'air sera activé	Faible: Lumière Bleue Moyen: Lumière Verte Fort: Lumière Rouge
C		Fonction Chaleur: Le bouton ne sera actif que quand les modes rouleaux ou massage automatiques seront activés	Chaleur ON: Lumière Rouge Chaleur OFF: Pas de Lumière
D		3 modes de massage automatiques: Appuyez une fois pour lancer le mode 1 et arrêter le massage par rouleaux; Appuyez deux fois pour lancer le mode 2; Appuyez trois fois pour lancer le mode 3	Mode 1: Lumière Bleue Mode 2: Lumière Verte Mode 3: Lumière Rouge
E		2 modes de massage par rouleaux: Appuyez une fois pour commencer le massage par rouleaux uniquement. Appuyez une seconde fois pour activer les rouleaux ainsi que le massage par pression d'air	Mode 1: Lumière Verte Mode 2: Lumière Bleue

Auto Timer : 15 minutes. L'appareil s'arrêtera automatiquement au bout de 15 minutes pour éviter une éventuelle surchauffe. Pensez à débrancher l'appareil du secteur si il reste inutilisé pendant une longue période.

Si la coque est endommagé ou en cas de défaillance technique, merci d'arrêter l'utilisation du produit et contactez notre support: support@webiness.fr